

Brystforstørrelse med MENTOR® brystimplantater



VISSTE DU DETTE?

På verdensbasis utføres det over 1 million brystforstørresesoperasjoner hvert år*

VI ER HER FOR Å HJELPE DEG Å TA EN TRYGG OG VELOVERVEID BESLUTNING

Denne brosjyren er ment som en hjelp til å forberede deg på prosessen som ligger foran deg, og inneholder informasjon om MENTOR® brystimplantater for forstørrelses- eller revisjonskirurgi. Når du vurderer brystforstørrelse, er det viktig at du har klart for deg hvilke mål du har for utseendet ditt, og hvilke spørsmål du ønsker å stille.

MENTOR – ET SELSKAP SOM BRYR SEG

For Mentor kommer pasientsikkerhet først. Mentors ambisjon er å tilby brystimplantater av toppkvalitet, og våre implantater har vært førstevalget til millioner av kvinner over hele verden i 30 år. MENTOR® brystimplantater er offisielt godkjent i over 100 land på verdensbasis, og ALLE MENTOR® implantater har livstidsgaranti.



INNHALDSFORTEGNELSE

Beslutningen tas av deg	1
Brystets anatomi	4
Valg av snitt og plassering	5
Operasjon	7
Et implantat tilpasset den enkelte kvinne	7
Om MENTOR® brystimplantater	13
Rekonvalesens	15
Garantiordningen MENTORløfte	16
Informasjon om brystforstørrelse	17
Spørsmål du bør stille din plastikkirurg	19
Mentor – et selskap som bryr seg	21
Viktig informasjon	bakside

BESLUTNINGEN TAS AV DEG

For mange kvinner er det å føle seg selvsikker, levende og sprudlende ensbetydende med å se godt ut. Tusener av kvinner har fått selvtillit og personlig tilfredshet ved å velge brystforstørrelse.

Det kan være mange grunner til at kvinner velger brystforstørrelse. Noen av grunnene er følgende:

- brystforstørrelse for å gjøre kroppen mer proporsjonal
- reskulpturering og forstørrelse av bryster som har mistet fasong på grunn av amming
- balansering av bryster som har ulik størrelse eller form


Dine grunner er høyst personlige, og beslutningen om brystforstørrelse bør tas av deg i samråd med kirurgen, basert på dine personlige behov, ønsker og forventninger.

I dag finnes det mange alternativer for kvinner som bestemmer seg for at brystforstørrelse er riktig for dem.

Denne brosjyren er utformet for å gi deg mer informasjon om brystforstørrelse og hvilke alternativer du har. Den er ikke ment som en erstatning for eventuelle samtaler mellom deg og kirurgen.

VISSTE DU DETTE?

For kvinner som fikk utført primær brystforstørrelse med MENTOR® MemoryGel™ brystimplantater, var det en statistisk signifikant forbedring av kvinnes tilfredshet med egen kropp, både når det gjaldt brystet og seksuell tiltrekningskraft generelt.¹

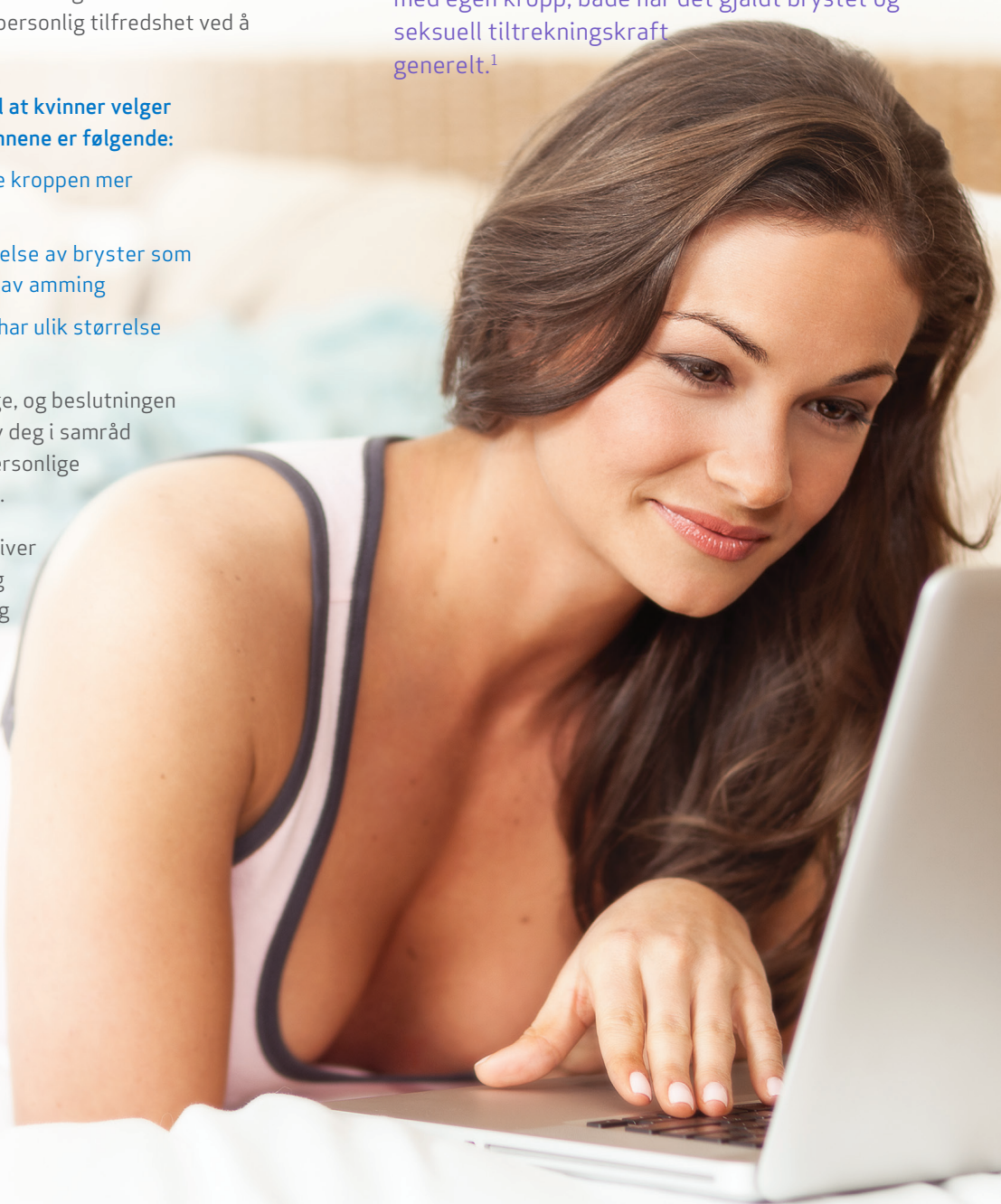




BRYSTETS ANATOMI


Brystet består av melkeganger og melkekjertler omgitt av fettvev som gir det form og følelse.

Det er viktig å forstå at implantater brukes for å gjøre brystet større. Implantater alene vil ikke alltid i tilstrekkelig grad løfte brystet eller korrigere virkningen av svangerskap, vekttap eller slapp hud. Kirurgen vil eventuelt foreslå ytterligere prosedyrer under selve brystforstørrelsen, for eksempel mastopeksi, for å oppnå forbedret brystløft.

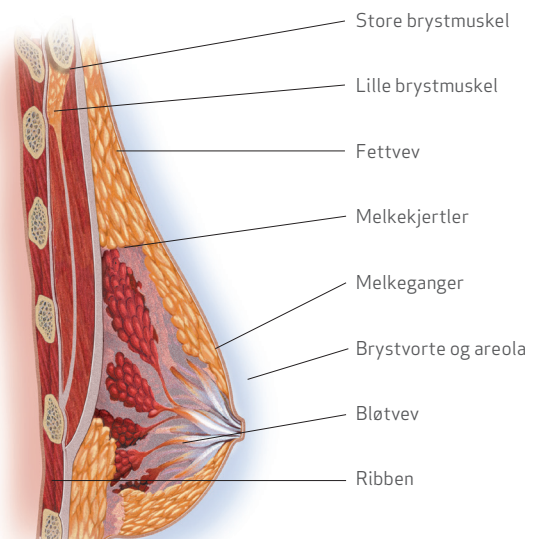

© Mentor Worldwide LLC

VALG AV SNITT OG PLASSERING

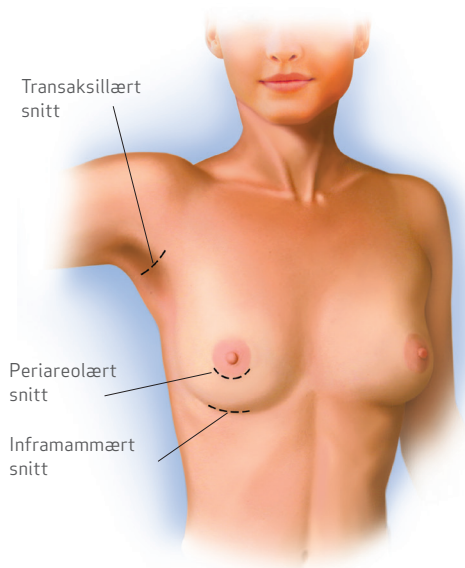

Snitt

Brystforstørrelse utføres normalt via et av de tre vanligste snittstedene: under armen (**transaksillært**), rundt brystvorten (**periareolært**) eller brystfolden (**inframammært**).

- **Transaksillært** – dette snittet er mindre skjult, men kan være et godt alternativ for kvinner som vil unngå arr på brystene.
- **Periareolært** – dette snittet er ofte mer skjult. Siden man må skjære gjennom brystvevet, er det forbundet med større risiko for ammeproblemer enn ved de andre snittstedene. Ved å skjære gjennom vevet øker man sjansen for at følsomheten i brystet eller brystvorten endres.
- **Inframammært** – dette snittet er som regel mindre skjult og kan forårsake færre problemer med amming enn snitt rundt brystvorten.

Kirurgen vil forklare deg hvert snittalternativ i detalj, slik at du kan ta en beslutning som er riktig for deg.

Plassering

Under en brystforstørrelse blir implantatene plassert enten under brystmuskelen (**submuskulært**) eller over brystmuskelen (**subglandulært**).


Submuskulær plassering

Denne prosedyren kan gjøre implantatene mindre følbare gjennom huden, og det er også mindre risiko for at det dannes hardt arrvev rundt implantatene. Prosedyren vil gjøre det enklere å ta røntgenbilde av brystet ved en eventuell mammografi. Ulemper med denne plasseringen kan være et lengre inngrep og en lengre rekonvalesenstid.

Subglandulær plassering

Denne prosedyren kan gjøre inngrepet kortere og redusere rekonvalesenstiden. En potensiell ulempe kan være at kantene på implantatet blir mer synlige under huden. Det kan også bli vanskeligere å ta røntgenbilder i forbindelse med mammografi dersom implantatene plasseres subglandulært.

Rådfør deg med kirurgen om de ulike plasseringsalternativene, slik at du kan ta en beslutning om hvilket alternativ som er det rette for deg.

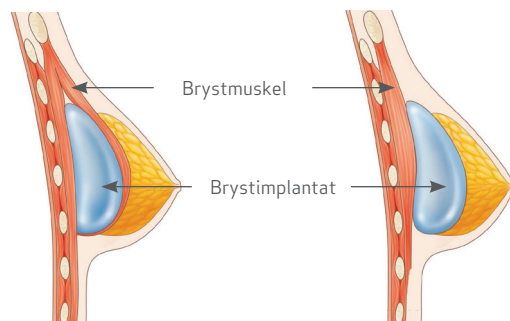

Submuskulær plassering

Subglandulær plassering

OPERASJON

Brystforstørrelser utføres i en operasjonsstue på et sykehus eller en kirurgisk klinikk. Du kan som regel dra hjem samme dag som operasjonen utføres. Vanligvis benyttes narkose, slik at du sover under operasjonen.

Operasjonen tar som regel 1–2 timer. Kirurgen foretar et snitt og lager en lomme hvor brystimplantatet plasseres. Når implantatet er plassert i riktig posisjon, lukkes snittet med kirurgiske sting.

For å oppnå best mulig resultat og gjøre rekonvalesensen så rask som mulig, kan du sammen med din kirurg diskutere hvilke spesifikke teknikker som passer best for dine behov.

VISSTE DU DETTE?

MENTOR® MemoryShape® silikonfylte brystimplantater/CPG™ silikonfylte brystimplantater har en pasienttilfredshet på **96,9 %** etter 10 år.³

ET IMPLANTAT TILPASSET DEN ENKELTE KVINNE

Et brystimplantat er en pose (implantatskall) laget av silikonelastomer fylt med silikongel eller saltløsning som implanteres kirurgisk under brystvevet eller under brystmuskelen⁴.

Gelfylte brystimplantater

MENTOR® MemoryGel™ brystimplantater er fylt med Mentors patenterte kohesive gel, som har en fast form samtidig som den ligner den naturlige elastisiteten i brystvevet.

Den unike kohesive gelen i MENTOR® MemoryGel™ brystimplantater gir en myk og naturlig følelse som foretrekkes av millioner av kvinner.^{†,4} MENTOR® MemoryGel™ brystimplantater fås i

- flere størrelser
- flere profiler (fra moderat profil til ultra høy)
- ulik overflatestruktur (glatt overflate eller SILTEX™ silikontekstur)
- flere former (rund eller anatomisk) slik at du skal finne ditt optimale implantat

Brystimplantater måles i centimeter – eller cc – ikke i cupstørrelse. Størrelsen på implantatet som benyttes, avhenger av størrelsen og fasongen på brystkassen til hver enkelt pasient.

Kirurgen vil vurdere dine nåværende bryster og hudvevet for å fastslå om du har nok vev til å dekke det ønskede brystimplantatet. I noen tilfeller, for eksempel etter et svangerskap, kan du ha overflødig hudvev. Hvis du ønsker et brystimplantat som er for stort for vevet ditt, kan kirurgen advare deg om at kantene på implantatet kan bli synlige eller følbare etter operasjonen. Overdrevent store brystimplantater kan også fremskynde effekten av tyngdekraften og føre til at brystene blir slappe eller henger tidligere.

[†]Sammenlignet med brystimplantater fylt med saltløsning.


Rundt eller anatomisk?

Avhengig av hvilken form du ønsker å oppnå, kan du i samråd med kirurgen velge enten et rundt eller et anatomisk formet implantat. Begge typer fås med silikon-gel eller saltløsning.

Round MENTOR® MemoryGel™ silikonfylte brystimplantater




Rund utførelse, ser ut og føles som naturlig brystvev. Implantatet gir et formfullt utseende med mer kløft. Overflaten er glatt eller teksturert. Implantatene fås i flere størrelser.

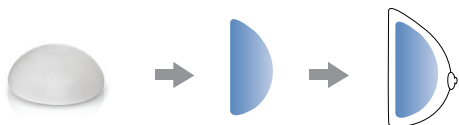

Anatomiske MENTOR® CPG™ silikonfylte brystimplantater



CPG™ står for Contour Profile Gel, et anatomisk formet brystimplantat fra Mentor. Det har en dråpeformet utførelse, og etterligner silhuetten til et naturlig bryst. Implantatene fås i flere størrelser.

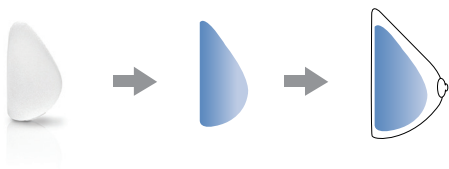

Implantatprofiler

I tillegg til størrelse og form fås brystimplantater i forskjellige profiler (som henviser til hvor mye implantatet stikker ut fra brystveggen). Generelt kan man si at jo større cupstørrelse du ønsker, desto større brystimplantat vil kirurgen vurdere.

VISSTE DU DETTE?

Kliniske data viser at MENTOR® MemoryGel™ silikonfylte brystimplantater / CPG™ silikonfylte brystimplantater har den laveste rapporterte forekomsten av komplikasjoner ved primær brystforstørrelse etter 10 år.^{*§5,5,6}

Implantatoverflater

Brystimplantater fås med enten glatt eller teksturert overflate. Blant kirurger og pasienter har det vært mest vanlig å velge teksturerte implantater. MENTOR® Round og CPG™ silikonfylte brystimplantater tilbyr SILTEX™ Texture, en TEKSTUR DU KAN STOLE PÅ, produsert av Mentor og har langsiktige kliniske data.

I samråd med kirurgen kan du bestemme hvilket implantat som er riktig for deg.

MENTOR® MemoryGel™ brystimplantater føles mer som naturlig brystvev, uten at det går på bekostning av pålitelighet eller sikkerhet, sammenlignet med brystimplantater fylt med saltløsning.

* Ikke en head-to-head-studie. Basert på sammenligning av komplikasjonsrater rapportert i 10-års kjernestudiene av MemoryShape® / CPG™ silikonfylte brystimplantater, NATRELLE™ 410 TruForm™ 3 Gel brystimplantater, NATRELLE™ Round TruForm™ 1 Gel brystimplantater og MemoryGel™ brystimplantater.

§ Ikke en klinisk head-to-head-studie. Basert på en sammenligning av data fra en 10-års klinisk kjernestudie av primær brystforstørrelse, revisjonsforstørrelse og primær brystrekonstruksjon med MENTOR® MemoryGel™ brystimplantater og NATRELLE™ Round TruForm 1 Gel brystimplantater.

Pasienter med MENTOR® CPG™ silikonfylte brystimplantater

HVORFOR
DETTE BILDET
ER VIKTIG
FOR DEG:

Vi har delt et MENTOR®
MemoryGel™ brystimplantat
i to for å vise den faste formen
til gelmaterialet. Silikonet er
en kohesiv, gelatinlignende substans
som fungerer mer som et fast stoff enn en væske.

Smooth Round MENTOR®
MemoryGel™ bryst
implantat, Cohesive I™

All Cohesive, All the Time™

MENTOR® MemoryGel™ brystimplantater føles som naturlig brystvev, uten at det går på bekostning av pålitelighet eller sikkerhet, sammenlignet med brystimplantater fylt med saltløsning. Vi tilbyr tre grader av kohesivt silikongel, fra mykt til fast:

Cohesive I™ – den mykeste silikongel, fås i våre Round Gel-modeller

Cohesive II™ – noe fastere silikongel, fås i våre Round Gel-modeller

Cohesive III™ – Mentors fasteste silikongel, fås i våre CPG-modeller



SILTEX™ Round
MemoryGel™
brystimplantat



Smooth Round
MemoryGel™
brystimplantat

MENTOR® CPG™ silikonfylte brystimplantater er fylt med Mentors mest kohesive gel, Cohesive III™, som er formstabil for å gi et optimalt estetisk resultat.



MENTOR® CPG™ silikonfylte
brystimplantater



Om MENTOR® brystimplantater

VISSTE DU DETTE?

Mengden av silikon som frigjøres fra brystimplantater, er mindre enn mengden du absorberer fra vanlige silikonholdige produkter i hjemmet ditt!⁷

LANG ERFARING



Brystimplantater av høy kvalitet til **millioner av kvinner verden over**

TILGJENGELIG I
100+
LAND



SIKKERHET FØRST

Sikkerheten er testet i kliniske studier som omfatter

190 000+ pasienter⁸



Og skulle det oppstå komplikasjoner, er du dekket av en **garanti i særklasse****

PÅLITELIG KVALITET



Omfattende vitenskapelige tester som følger strenge produksjonsstandarder

Godkjenning  

MENTOR® brystimplantater er gjennomgått og godkjent av relevante tilsynsorganer som bekrefter at produktene oppfyller gjeldende helse- og sikkerhetsstandarder

**Ved bekreftet ruptur eller lekkasje på et MENTOR® brystimplantat som følge av slitasje eller delaminering som krever kirurgi, vil Mentor uavhengig av implantatets alder tilbyt nytt MENTOR® brystimplantatet uansett størrelse i samme eller lignende utførelse som produktet som opprinnelig ble implantert. Det er kun selve MENTOR® brystimplantatet som omfattes av livstidsgarantien, ikke kostnaden ved kirurgi.

REKONVALESENS

Rekonvalesensen er forskjellig fra pasient til pasient. Generelt vil du trolig føle litt sårhet i noen dager etter brystoperasjonen. Du vil føle mest ubehag de første 24-72 timene etter operasjonen. Brystene vil være hovne og veldig ømme. Selv om rekonvalesensen er forskjellig fra pasient til pasient, bør du kunne gjenoppta lette aktiviteter etter ca. én uke.

En viktig del av rekonvalesensen kan omfatte bruk av postoperativ bh eller kompresjonstøy. Kompresjonstøy gir deg ekstra støtte under tilhelingen. Legen kan også gi deg andre råd som du bør følge etter inngrepet. Skulle det oppstå problemer etter brystoperasjonen, må du kontakte kirurgen din øyeblikkelig.



MENTORløfte

Markedets mest omfattende garantiordning



Som verdens fremste produsent av kvalitets-implantater i over 30 år, har Mentor vært et pålitelig valg for millioner av kvinner verden over.

Med kvalitet og innovasjon i ryggen kan vi overgå vanlig bransjestandard, med markedets mest **omfattende garantiordning⁹** – **MENTORløfte**.

Oversikt over garantien innunder mentorløftet



GRATIS OG **AUTOMATISK** INNMELDING



PRODUKTET **ERSTATTES** VED RIFT/
RUPTUR* INNENFOR PRODUKTETS
LEVETID



OPPTIL **€1000** FINANSIELL BISTAND VED
RIFT/RUPTUR[†]



PRODUKTET **ERSTATTES** VED
KAPSELKONTRAKTUR (Baker III/IV),
DOBBELTKAPSLING OG SEROMA I SENSTADIE[‡]



KONTRALATERALT IMPLANTAT OM
KIRURGEN DIN BER OM DET

* Dersom det bekreftes rift/ruptur i et brystimplantat fra Mentor[®] på grunn av slitasje eller delaminering, som krever kirurgisk inngrep, uavhengig av alderen på implantatet, vil Mentor tilby et nytt brystimplantat fra Mentor[®], uansett størrelse, i samme eller lignende stil som det opprinnelig implanterte produktet.

† Når det er nødvendig med kirurgi for å skifte ut et gelefylt brystimplantat, fra Mentor[®], fordi det er bekreftet rift/ruptur som har oppstått innenfor ti (10) år fra implantasjonsdatoen, forutsatt at det er bevis, og bekreftet av Mentor, at man kvalifiserer til dette ut fra deres vurdering og evaluering, vil Mentor betale uforsikrede, nødvendige utgifter for operasjonssue, anestesi og/eller kirurgiske utgifter direkte relatert til kompenserende kirurgi, opptil en maksimal samlet pris på €1000. Utgifter til operasjonssue og anestesi skal prioriteres ved betaling. I slike saker må forespørselen vedrørende finansiell hjelp, i henhold til mentorløftegarantien, fremmes for kirurgen din. Med finansiell bistand, mener vi ikke at dette er et lån.

‡ I tilfelle av kapselkontraktur (Baker III/IV), dobbeltpaksling eller seroma i senstadie ved forstørrende kirurgi med et gelefylt brystimplantat fra Mentor[®], vil Mentor tilby et erstatningsprodukt fra Mentor[®] innenfor en periode på ti (10) år fra implantasjonsdatoen, forutsatt at det er bevis, og bekreftet av Mentor[®], at man kvalifiserer til dette ut fra deres evaluering av uttatt produkt og vurdering av all nødvendig dokumentasjon. Mentor vil tilby et erstatningsprodukt i samme eller tilsvarende stil og størrelse som det opprinnelig implanterte produktet.

INFORMASJON OM BRYSTFORSTØRRELSE

Benytt informasjonskildene for mer informasjon om
brystforstørrelse

www.kreftforeningen.no

www.mentorwwllc.eu

www.medistim.no/produkt/brystimplantater

www.yourbreastoptions.com



SPØRSMÅL DU BØR STILLE DIN PLASTIKKIRURG

- I hvor mange år har du utført brystforstørrelsesoperasjoner?
- Hvor mange brystforstørrelsesoperasjoner utfører du i året?
- Hvilke mulige risikoer og komplikasjoner er forbundet med brystforstørrelseskirurgi?
- Hvilke alternativer for brystforstørrelse har jeg?
- Hva vil du anbefale med hensyn til form, størrelse, overflatetekstur, snittsted og plassering?
- Hvordan vil min evne til å amme påvirkes?
- Hvordan kan jeg forvente at brystene vil se ut over tid?
- Har du før-og-etter-bilder jeg kan få se?



MENTOR – ET SELSKAP SOM BRYR SEG

Mentor Worldwide LLC ble grunnlagt i 1969 og er en ledende produsent og leverandør av medisinske produkter til over 100 land i det globale markedet for estetisk medisin og rekonstruksjonskirurgi. Som verdens ledende produsent av førsteklasses brystimplantater kan vi tilby deg årelang erfaring og kvalitetsprodukter du kan stole på.

Mentors virksomhet omfatter forskning, utvikling og produksjon ved flere anlegg i Europa og USA. Selskapet har også salgs- og distribusjonskontorer over hele verden. I 1995 ble Mentor den første produsenten av brystimplantater som fikk produktene sine CE-godkjent.

Mentor er stolt av kvaliteten på hvert eneste brystimplantat. Du kan være trygg på at Mentor forstår dine ønsker og forhåpninger, og virkelig bryr seg.

¹ Mentor Worldwide LLC. MemoryGel® Clinical Study Final Report, April 2013

² Hurst, N.M. Lactation after augmentation mammoplasty. Obstet. Gynecol. 87(1):30-4.

³ Mentor Worldwide, LLC. MemoryShape® Post-Approval Cohort Study (formerly Contour Profile Gel Core Study) Final Clinical Study Report. 1st dag 2. juni 2015

⁴ Bondurant, S., Ernst, V., and Herdman, R. Safety of Silicone Implants. Washington, DC: National Academy Press, 1999.

⁵ Mentor Worldwide, LLC. MemoryShape® Post-Approval Cohort Study (formerly Contour Profile Gel Core Study) Final Clinical Study Report. 1st dag 2. juni 2015

Mentor Worldwide LLC. Data on File. MemoryGel® Core Gel Clinical Study Final Report, April 2013.

Maxwell, G. Patrick; Van Natta, Bruce W.; Bengtson, Bradley P.; and Murphy, Diane K., "Ten-Year Results From the Natrelle 410 Anatomical Form-Stable Silicone Breast Implant Core Study" (2015). Public Health Resources.

Health Canada: Summary Basis of Decision (SBD) for Natrelle™ Highly Cohesive Silicone-Filled Breast Implants. Application No. 88573. License No 72262. Date Issued: 2014/01/17.

Health Canada: Summary Basis of Decision (SBD) for Natrelle™ Silicone-Filled Breast Implants-Smooth Shell With Barrier and Natrelle™ Silicone Filled Breast Implants - Textured Shell with Barrier Layer. Application No. 61865 and 60524 License No License No 72264 and 72263. Date Issued: 2012/09/25.

⁶ Spear, Scott, et al. Natrelle Round Silicone Breast Implants:

Core Study Results at 10 Years. Plast Reconstr Surg. 2014;133(6):1354-1361

Health Canada: Summary Basis of Decision (SBD) for Natrelle™ Highly Cohesive Silicone-Filled Breast Implants. Application No. 88573. License No.72262. Date Issued: 2014/01/17.

Health Canada: Summary Basis of Decision (SBD) for Natrelle™ Silicone-Filled Breast Implants-Smooth Shell With Barrier and Natrelle™ Silicone Filled Breast Implants - Textured Shell with Barrier Layer. Application No. 61865 and 60524 License No License No 72264 and 72263. Date Issued: 2012/09/25.

Mentor Worldwide LLC. MemoryGel® Core Gel Clinical Study Final Report, April 2013

⁷ <http://www.fda.gov/ohrtm/dockets/ac/05/transcripts/2005-410113.htm> Accessed December, 2016.

⁸ Summary of the Safety and Effectiveness of MENTOR® MemoryGel™ Silicone Gel-Filled Implants in Patients who are Undergoing Primary Breast Augmentation, Primary Breast Reconstruction, or Revision: 10-Year Core Gel Final Clinical Study Report, April 2013. MemoryGel® Post Approval Study Seventh Annual Report, November 5, 2013.

Adjunct Study Final Report for MENTOR® MemoryGel™ Silicone Gel-Filled Breast Implants, 02 November 2012.

Mentor Worldwide, LLC. MemoryShape® Post-Approval Cohort Study (formerly Contour Profile Gel Core Study) Final Clinical Study Report. 1st dag 2. juni 2015

MENTOR Becker Expander/Breast Implant Clinical Trial 2013 Annual Report.

MemoryShape® Post-Approval Cohort Study (formerly Contour Profile Gel Core Study), 2013.

CPG™ Styles Study: A Study of the Safety of the Contour Profile Gel Breast Implants in Subjects who are Undergoing Primary Breast Augmentation, Primary Breast Reconstruction, or Revision. 2015.

MemoryShape™ Post-Approval Continued Access Study (formerly Contour).

⁹ Based on warranty comparisons of the following breast implants:

Allergan Natrelle: <http://www.natrelle.co.uk/breast-enhancement/Pages/warranty.aspx>, EuroSilicone & Nator: http://nagor.com/pdf/Warranty_PDF_Nagor.pdf, Arion: http://www.laboratoires-arion.com/images/arion_GUARANTEE_PROGRAM_ENG.pdf.

Polytech: http://www.polytechhealth.info/images/pdf/roE_Information_eng_2015-01.pdf, Motiva: <https://motivacomplaints.com/product-warranty/>, Sebbin: Garantie des IMPLANTS MAMMAIRES and La garantie premium, Accessed March 20 2017.

VIKTIG INFORMASJON

MENTOR®s sortiment av brystimplantater er indisert for brystforstørrelse hos kvinner som er fylt 18 år.

Brystimplantatkirurgi bør ikke utføres på kvinner

- med aktiv infeksjon i kroppen
- med brystkreft eller forstadium til brystkreft som ikke har fått adekvat behandling for tilstanden
- som er gravide eller ammer

Sikkerhet og effekt er ikke påvist hos pasienter med autoimmun sykdom (for eksempel lupus og sklerodermi), svekket immunforsvar, tilstander som påvirker sårtilheling og blodkoagulering eller redusert blodtilførsel til brystvevet. Pasienter som er diagnostisert med depresjon eller andre mentale helsetilstander, bør vente med å gjennomgå brystimplantatkirurgi til disse tilstandene er over eller har stabilisert seg.

Brystimplantatkirurgi er forbundet med risiko. Du bør være klar over at brystimplantater ikke varer livet ut, og at brystimplantasjon ikke nødvendigvis er et engangsinngrep. Det kan oppstå behov for ytterligere uplanlagt kirurgi på brystene som følge av komplikasjoner eller uakseptable kosmetiske resultater. Mange av endringene i brystene etter implantasjon er irreversible (kan ikke gjøres om), og brystimplantater kan påvirke din evne til å amme, enten ved å redusere eller eliminere melkeproduksjonen.

Brystimplantater varer ikke livet ut, og brystimplantasjon er ikke nødvendigvis et engangsinngrep. De vanligste komplikasjonene knyttet til brystforstørrelse med MemoryGel™ implantater omfatter reoperasjon, kapselkontraktur, endret følelse i brystvortene og fjerning av implantat med eller uten utskiftning. De vanligste komplikasjonene knyttet til CPG™ implantater ved brystforstørrelse omfatter reoperasjon av alle årsaker, fjerning av implantat med eller uten utskiftning og ptose. En mindre vanlig komplikasjon er ruptur. De helsemessige konsekvensene av ruptur på et silikonimplantat er ikke fullt ut påvist. MR-skanning anbefales tre år etter den første implantasjonen og deretter annethvert år for å avdekke asymptomatisk ruptur.



Denne brosjyren er kun ment som informasjon og er ikke en erstatning for medisinsk rådgivning. Du bør rådføre deg med kirurgen din om hva du kan forvente, og følge kirurgens råd når det gjelder aktiviteter etter operasjonen.

Din klinikk:

Godkjent for EMEA-regionen.